


# Unistik® 3

Vorgespannte Sicherheitslanzette zum Einmalgebrauch  
*Comfort Zone Technology®* –  
zur schmerzarmen kapillaren Blutentnahme

An der Vorderseite des Lanzettenkörpers, der zur Blutabnahme gegen die Haut gedrückt wird, befinden sich 8 kleine Erhöhungen, welche beim Anpressen an die Haut die Nervenenden irritieren. Das Signal, welches an das Gehirn geleitet wird, reduziert die Schmerzwahrnehmung.

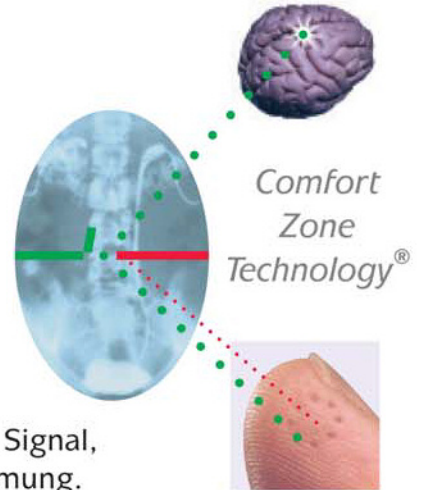

Die Unistik 3 – Einmal Sicherheitslanzetten sind für alle klinischen Bereiche geeignet und in 4 verschiedenen Ausführungen erhältlich.

## Wie benutzt man den Unistik 3 ... einfach drehen

### Unistik® 3 Comfort

PZN 3802421  
Abmessung: 28 G Tiefe 1,8 mm  
Durchschnittliche Blutmenge: 5µl - 30µl  
Vorgeschlagene Anwendungsbereiche:  
Alle Kapillarblutuntersuchungen für die o.a. Blutmenge ausreicht.



Packung mit je 100 Einheiten: AT 1042

### Unistik® 3 Normal

PZN 3802409  
Abmessung 23 G Tiefe 1,8 mm  
Durchschnittliche Blutmenge: 30µl - 75µl  
Vorgeschlagene Anwendungsbereiche:  
Durch die höhere Blutmenge besonders für Bluttransfusionszentren, Blutspendedienste aber natürlich auch für Cholesterinbestimmungen und alle anderen Routinebestimmungen des täglichen Laborbedarfs.



Packung mit je 100 Einheiten: AT 1002

### Unistik® 3 Extra

PZN 3802444  
Abmessung 21 G Tiefe 2,0 mm  
Durchschnittliche Blutmenge: 75µl - 125µl  
Dieser Lanzettentyp ist besonders für die Kapillare Blutgewinnung bei Patienten mit z.B. Hornhaut/Hautverdickungen und alle Untersuchungen die eine höhere Blutmenge erfordern geeignet.



Packung mit je 100 Einheiten: AT 1012

### Unistik® 3 Neonatal & Laboratory

PZN 3802438  
Abmessung: 18 G Tiefe 1,8 mm  
Durchschnittliche Blutmenge: 200 µl +  
Dieser Lanzettentyp ist speziell zur Kapillare/Fersen Blutgewinnung bei Früh- und Neugeborenen vorgesehen. Besonders für das Labor zur Durchführung von Blutgasanalysen etc. geeignet. Die Lanzettenspitze ist bei dieser Unistik 3 Version im Gegensatz zu den drei anderen Produktvarianten Klingenförmig geschliffen.



Packung mit je 100 Einheiten: AT 1052

Nehmen Sie den Unistik 3 in die Hand und drehen Sie die Schutzkappe der Lanzette einfach ab. – Nicht ziehen, einfach nur drehen –.



Entsorgen Sie die Schutzkappe.

## ... Blutentnahme

Wählen Sie einen Entnahmebereich wie z.B. auf den Bild-Darstellungen **A** und **B** vorgeschlagen. Drücken Sie die Vorderseite des Lanzettenkörpers gegen die gewählte Blutentnahmestelle und lösen Sie durch Druck auf den seitlichen Auslöseknopf den Einstich aus.

(Wenn erforderlich, massieren Sie die Einstichseite vor der Punktion leicht.)

Die Lanzette verschwindet nach dem Einstich sofort wieder im Lanzettenkörper und vermeidet damit zuverlässig das Risiko einer Verletzung/Kontamination.

Unistik 3 kann nach Gebrauch nicht erneut gespannt werden. Der Versuch dies zu tun zerstört sofort die Mechanik und verhindert dadurch evtl. Missbrauch zuverlässig.

